



# Calibration du capteur

## *Positionnement du capteur sur le bras*

- La position du capteur sur l'avant-bras aura un rôle important sur le fonctionnement et la réactivité de la main, d'une personne à une autre cette position sera différente, il vous faudra l'ajuster.




e-Nable France - RNA : W751231314 - SIRET : 818 510 141 00018



## Calibration du capteur

- Placer le capteur sur l'avant-bras et faire un appui long sur le bouton N°1

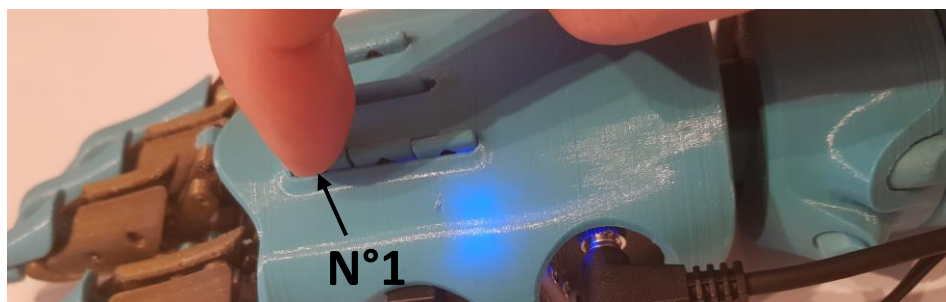

- Un léger mouvement des doigts vous indiquera que le mode « calibration » est activé.
- Faire pendant environ 10s des mouvements de droite à gauche avec votre poignet pour que le capteur puisse mesurer l'activité musculaire.



- Une fois la calibration terminée, la main reprendra son fonctionnement normal.

e-Nable France - RNA : W751231314 - SIRET : 818 510 141 00018